

# Dominant Flex Basic



Precious life, progressive care

メデラは、1982年以来ピストン・シリンダーシステム技術を搭載した吸引器を製造してピストン・シリンダーシステム技術／4ストローク原理を採用しており、立ち上がりも早く、メデラは耐久性のある高品質の吸引器を提供します。

## 軽量・コンパクトなデザイン

約9.3kgを実現(Dominant Flex／Basic)しました。

## Clean Touch™テクノロジー

エッジ、ギャップのないボタンを採用しています。凹凸がないため、衛生的な状態を保つことができます。クリーニングも簡単です。

## シンプルなデザイン


ユーザーフレンドリーで操作も簡単。

## 種類豊富なアクセサリー

多様なニーズに対応します。

## 4ストローク方式の ピストンシリンダーシステム

安定した吸引圧を提供し、振動も少なく、静かな操作を可能にします。

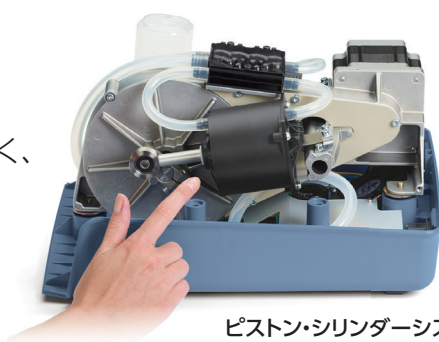

ピストン・シリンダーシステム

## バキュームゲージ(kPa/mmHg)

### 流量設定ボタン

#### Dominant Flexは流量設定が可能


ワンタッチで3種類の流量を選択できます。

ターボモード 60L/分

標準モード 50L/分

ウィスパモード 40L/分

※Basicシリーズは流量設定機能は付いていません。

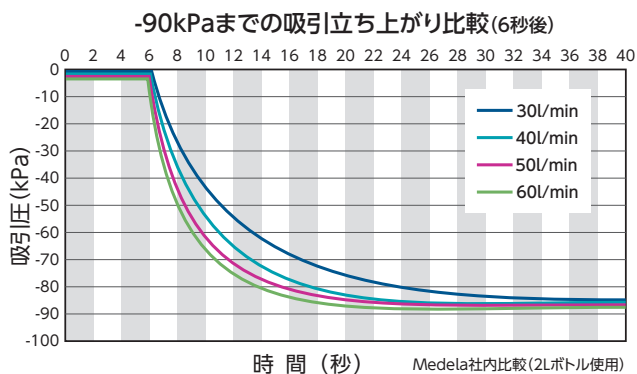

### メンブレン式吸引レギュレーター

#### 任意の吸引圧を設定可能

ユーザーフレンドリーなノブを採用、手術室用手袋を着けていても簡単に操作できます。立ち上がりの早い吸引を提供します。



います。  
静かで振動がありません。

## リユーズブルシステム

ボトルには耐熱水性、耐久性に優れたポリサルフォン樹脂を採用。広口ボトルで洗浄も簡単。オートクレーブ滅菌可。



豊富なサイズバリエーション  
サイズ：1L、2L、3L、5L

## ディスプレイザブルシステム

サイズによって色分けされているため、識別が容易にできます。



イエロー：1.5L  
オレンジ：2.5L

## キャリーハンドル

### 排液ボトル用ホルダー取付け可能

両サイドにクランプホルダーの取付けができ、トrolleyなしでも使用できます。

※ポータブル吸引器のみ




## トラップボトル

### 2stepオーバーフロー防止機能

排液が溢れた場合、吸引器本体に排液が入り込むことを防止します。

また、付属品のオーバーフロー防止フィルターと同時に使用することで2段階でオーバーフローを防止することが可能です。

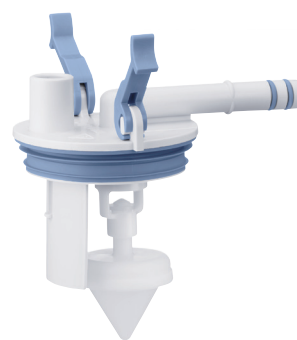

## オン／オフボタン LEDインジケーター

### ランプの色で動作確認可能

電源がオンになっている時、LEDインジケーターのランプが点灯します。

緑色：スタンバイモード

白：作動中

黄色：エラー



# Line Up

## Dominant Flex



①Dominant Flexポータブル



②Dominant Flex

## Basic



③Basicポータブル



④Basic



⑤トローリー



⑥フット式吸引レギュレータ

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売認証番号
①	08-250-03	4946329356007	Dominant Flex ポータブル吸引器	II	302AGBZ100004000
②	08-250-02	4946329355994	Dominant Flex 吸引器		
③	08-250-01	4946329355987	Basic ポータブル吸引器		
④	08-250-00	4946329355970	Basic 吸引器		
⑤	08-250-04	4946329356014	吸引器トローリー I Basic/Dominant Flex用		
⑥	08-250-05	4946329359534	フット式吸引レギュレータI Basic/Dominant Flex用		

# Accessories

## ▶ リューザブルシステム




	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-253-00	4946329356175	リューザブルボトル 0.5L	I	13B1X00306N10317
②	08-253-01	4946329356182	リューザブルボトル蓋 0.5L用		
③	08-253-02	4946329356199	リューザブルボトル 1L		
④	08-253-03	4946329356205	リューザブルボトル 2L		
⑤	08-253-04	4946329356212	リューザブルボトル 3L		
⑥	08-253-05	4946329356229	リューザブルボトル蓋 1L・2L・3L用		
⑦	08-253-09	4946329356267	リューザブルボトル 5L		
⑧	08-253-10	4946329356274	リューザブルボトル蓋 5L用		

## ▶ ディスポーザブルシステム




	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-252-00	4946329356113	ライナーセットボトル 1.5L用	I	13B1X00306N10315
②	08-252-01	4946329356120	ライナー 1.5L 40個入り		13B1X00306N10316
③	08-252-02	4946329356137	ライナー 1.5L 凝固剤入り 30個入り		13B1X00306N10316
④	08-252-03	4946329356144	ライナーセットボトル 2.5L用		13B1X00306N10315
⑤	08-252-04	4946329356151	ライナー 2.5L 40個入り		13B1X00306N10316
⑥	08-252-05	4946329356168	ライナー 2.5L 凝固剤入り 30個入り		13B1X00306N10316

## ▶ アクセサリー

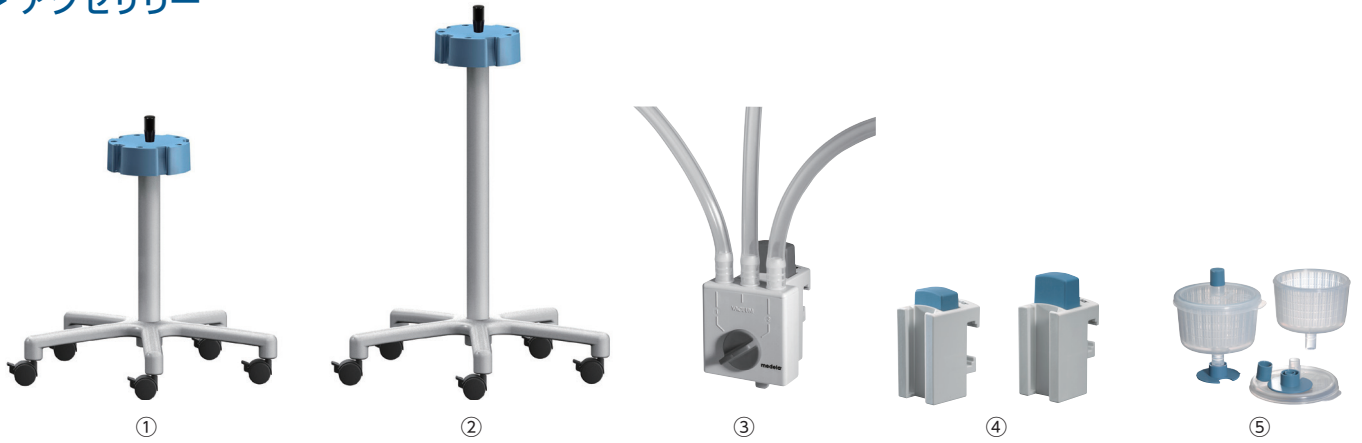


	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-251-00	4946329356021	吸引トローリーI	-	-
②	08-251-01	4946329356038	吸引トローリーII	-	-
③	08-251-02	4946329356045	チェンジオーバーバルブ	I	13B1X00306N10318
④	08-251-03	4946329356052	クランプホルダー 5個入り	-	-
⑤	08-251-08	4946329356106	ディスプレイザブル採集カップ 10個入り	I	13B1X00306N10319

## ▶ 排気用チューブ・コネクタ

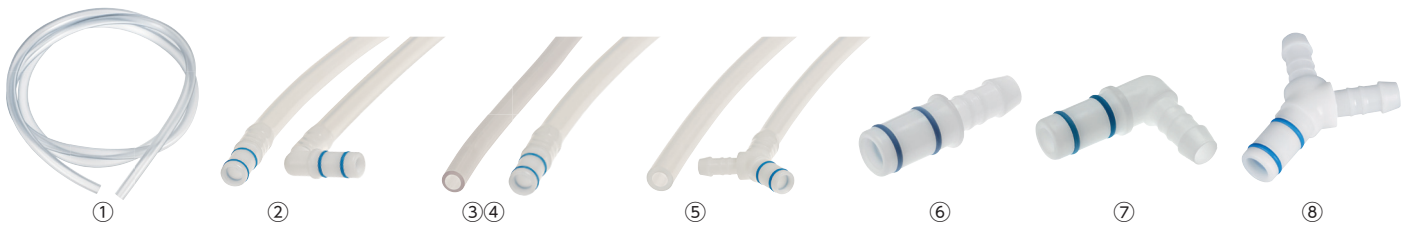

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-254-01	4946329356335	排気チューブ 2,500cm	I	13B1X00306N10318
②	08-254-02	4946329356342	排気チューブ 25cm Iコネクタ・Lコネクタ付き		
③	08-254-03	4946329356359	排気チューブ 25cm Iコネクタ付き		
④	08-254-04	4946329356366	排気チューブ 60cm Iコネクタ付き		
⑤	08-254-05	4946329356373	排気チューブ 連結用 25cm Yコネクタ付き		
⑥	08-254-06	4946329356380	Iコネクタ 排気チューブ用 10個入り		
⑦	08-254-07	4946329356397	Lコネクタ 排気チューブ用 10個入り		
⑧	08-254-08	4946329356403	Yコネクタ 排気チューブ用 10個入り		

## ▶ 排液用チューブ・コネクタ

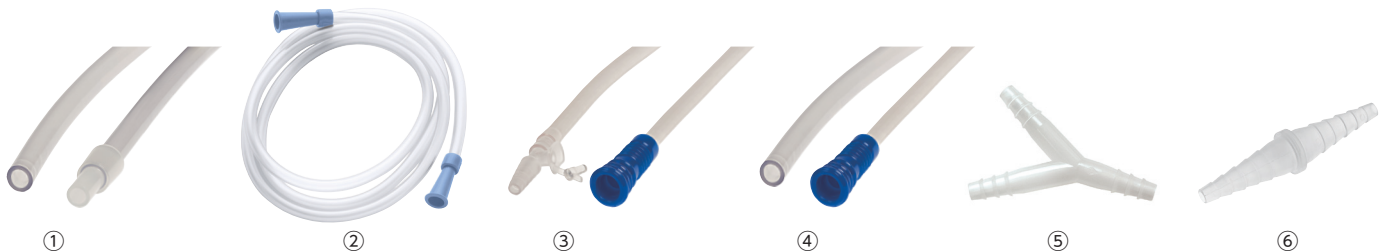

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-255-01	4946329356434	患者チューブ 連結用 34cm 100本入り	I	13B1X00306N10319
②	08-255-02	4946329356441	患者チューブB 150cm ファネル2個付き 30本入り		
③	08-255-03	4946329356458	患者チューブB 180cm ファネル・フィンガーチップ付き 30本入り		
④	08-255-04	4946329356465	患者チューブB 180cm ファネル付き 30本入り		
⑤	08-255-09	4946329356564	Yコネクタ 患者チューブ用 10個入り		
⑥	08-255-10	4946329356571	Lコネクタ 患者チューブ用 10個入り		

## ▶ フィルター



① ③ ⑦



② ④ ⑧



⑤



⑥

	商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出番号
①	08-256-00	4946329356588	ディスポーザブル オーバーフロー・バクテリアフィルター メデラ型 10個入り	I	13B1X00306N10318
②	08-256-01	4946329356595	ディスポーザブル オーバーフロー・バクテリアフィルター テーパー型 10個入り		
③	08-256-02	4946329356601	ディスポーザブル バクテリアフィルター メデラ型 10個入り		
④	08-256-03	4946329356618	ディスポーザブル バクテリアフィルター テーパー型 10個入り		
⑤	08-256-04	4946329356625	ディスポーザブル バクテリア・消臭フィルター テーパー型 10個入り		
⑥	08-256-05	4946329356632	ディスポーザブル バクテリア・消臭フィルター メデラ型 10個入り		
⑦	08-256-08	4946329374179	ディスポーザブル ウィルス・オーバーフローフィルター メデラ型 10個入り		
⑧	08-256-09	4946329374186	ディスポーザブル ウィルス・オーバーフローフィルター テーパー型 10個入り		

## Specification

	Dominant Flex/Dominant Flexポータブル	Basic/Basicポータブル
重量	9.3kg(Dominant Flex)	9.3kg(Basic)
外形寸法	210mm(高さ)×305mm(幅)×375mm(奥行)	210mm(高さ)×305mm(幅)×375mm(奥行)
最大吸引圧	-90kPa/-675mmHg	-90kPa/-675mmHg
最大吸引流量	60L/分	30L/分
定格電圧	AC100V-AC240V	AC100V-AC240V
定格電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
電源入力	120W	50W

管理医療機器 特定保守管理医療機器	類別: 器32 医療用吸引器 一般的名称: 電動式吸引器 販売名: 電動式吸引器 Basic/Dominant Flex JMDNコード: 36777000	製造販売認証番号: 302AGBZ100004000
一般医療機器	類別: 器32 医療用吸引器 一般的名称: 吸引器用ボトル 販売名: ディスポーザブル排液回収システム専用ボトル JMDNコード: 38476000	製造販売届出番号: 13B1X00306N10315
一般医療機器 再使用禁止	類別: 器32 医療用吸引器 一般的名称: 吸引器用キャスタ 販売名: ディスポーザブル排液回収システム JMDNコード: 34858000	製造販売届出番号: 13B1X00306N10316
一般医療機器	類別: 器32 医療用吸引器 一般的名称: 吸引器用ボトル 販売名: リューザブル排液回収システム JMDNコード: 38476000	製造販売届出番号: 13B1X00306N10317
一般医療機器	類別: 器51 医療用嘴管及び体液誘導管 一般的名称: 吸引チューブ 販売名: 排気チューブシステム JMDNコード: 16779000	製造販売届出番号: 13B1X00306N10318
一般医療機器 再使用禁止	類別: 器51 医療用嘴管及び体液誘導管 一般的名称: 吸引チューブ 販売名: 患者チューブシステム JMDNコード: 16779000	製造販売届出番号: 13B1X00306N10319

専任製造販売業者

# ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F  
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F  
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F  
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13  
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F  
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F  
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F  
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F  
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3  
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五泉工場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千葉工場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。