



HEMS plus+


MNIRC-600

4色のLED光源を搭載 蛍光カラーカメラ

200
万画素

FHD
1920×1080

HEMS plus⁺ MNIRC-600

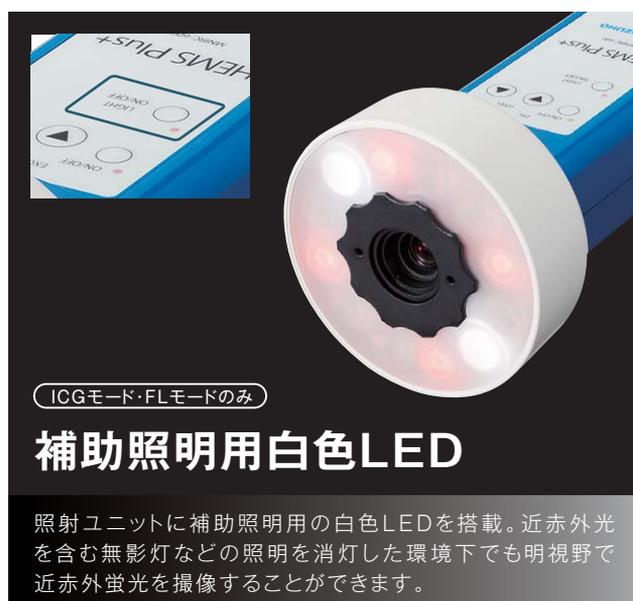



本体に滅菌ドレープを装着


高精細ハイビジョン画像

200万画素(1920×1080)のハイビジョンセンサーを搭載し、高精細な撮像が可能です。

小型設計したカメラ

操作性を重視したカメラユニットは、ハンディタイプで取り回しやすい小型設計です。ヘッドリング形状は従来のモデル(MNIRC-501)と共通。これまでの滅菌ドレープを装着できます。

コントローラ機能

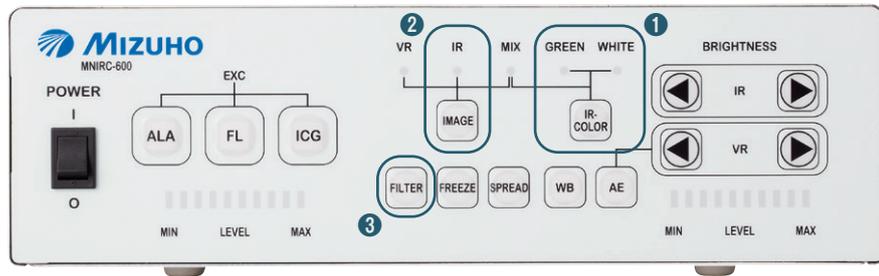

① ICG蛍光色のカラー選択が可能

ICGモードでは撮像する蛍光を緑色、白色に切り替えることが可能です。

ICGモードのみ

② モノクロ表示が可能


蛍光のみ撮像したい場合、IRモードを選択すると、モノクロ画像に切り替えることが可能です。

ICGモードのみ

③ 励起光カットフィルターの搭載

励起光カットフィルターにより、カメラ画像に映り込んでしまう各励起光をカット。より鮮明に各蛍光を撮像できます。

商品コード	JANコード	商品名	製造販売届出番号	クラス分類
08-705-00	4946329378146	HEMS plus+ MNIRC-600	13B1X00306G11132	I
構成品				
08-705-01	4946329359275	HEMS plus+ MNIRC-600 カメラユニット	13B1X00306G11132	I
08-705-02	4946329359282	HEMS plus+ MNIRC-600 コントローラユニット	13B1X00306G11132	
08-705-03	4946329359299	HEMS plus+ MNIRC-600 カメラケーブル	13B1X00306G11132	
17-100-04	4946329271096	ACアダプタ	13B1X00306G11132	
Option				
08-701-41	4946329263435	滅菌ドレープII(HEMS Handy カメラユニット用)20袋入り	—	—
08-704-13	4946329232035	電源コード 1.	13B1X00306G11132	I
08-705-20	4946329385007	HEMS plus+用 ラック	—	—

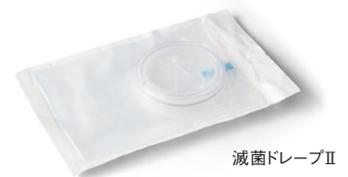

滅菌ドレープII

Specification

【電気的定格(ACアダプタの仕様)】

定格電源電圧	AC100V-AC240V
定格電源周波数	50Hz-60Hz
定格電源入力	1.62A-0.72A
電磁両立性	本製品はIEC 60601-1-2(JIS T 0601-1-2)に適合

【その他の仕様】

撮影可能波長帯域	約420nm-約660nm、約820nm-約900nm(撮影モードによる)
ピーク発光波長	405nm(ALA)、470nm(FL)、730nm(ICG)
被写体間距離	約200mm
電撃に対する保護	クラスI(ACアダプタ)

【カメラ・コントローラユニット仕様】

カメラユニット	外形	φ102×D193.5(mm)
	質量	約1kg
	イメージセンサ	有効200万画素(近赤外は有効33万画素)
	LEDリング照明	白色光、紫色光、青色光、近赤外光
コントローラユニット	外形	W300×D350×H98(mm)
	質量	約4kg
	映像出力端子	DVI-D端子×2

一般医療機器 特定保守管理医療機器	類 別：機械器具25 医療用鏡 一般の名称：可搬型手術用顕微鏡 販 売 名：近赤外カラーカメラシステム HEMS plus+ JMDNコード：36354020	製造販売届出番号：13B1X00306G11132
----------------------	--	---------------------------

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストックビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375


【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

 注意	<ul style="list-style-type: none">●事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。●定期点検および術前・術後の点検を行ってください。●アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。
---	---

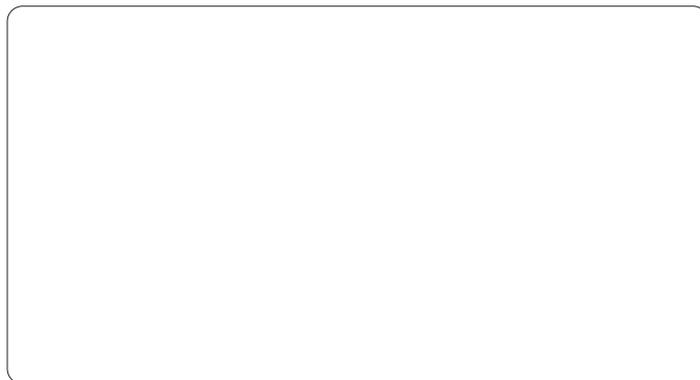

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。