

# Paramon® series

	Paramon® Pro (パラモン・プロ)	Paramon® μ (パラモン・マイクロ)	Paramon® Eco (パラモン・エコ)
入力出力数 (In×out数)	16×16チャンネル	8×8チャンネル	4×4チャンネル
録画チャンネル数	高画質3ch、低画質3ch	高画質3ch、低画質3ch	高画質1ch、低画質1ch
入力映像表示方式	入出力に合わせてポップアップ	入出力に合わせてポップアップ	アイコン固定
インターフェースデザイン	ユニバーサルデザイン	1面完結デザイン	1面完結デザイン
ライブ配信	○	○	○
HIS連携	○	△サーバー連携時のみ	—
4K対応	○	△：お問い合わせください	—
Video Over IP対応	○	△：お問い合わせください	—
消費電力	72W	72W	61W
録画フォーマット	mp4	mp4	mp4

○各商品はシステム構成により商品コードが異なります。詳細は営業担当者までお問い合わせください。



## ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13  
 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068  
 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068  
 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068  
 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068


【営業拠点】  
 北海道 TEL 011-716-4731 東北 TEL 022-227-1688  
 新潟 TEL 025-229-5458 北関東 TEL 03-3815-3193  
 東海 TEL 052-732-7130 関西 TEL 06-6444-3840  
 中国 TEL 082-241-8826 九州 TEL 092-431-5022

【関東圏販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】  
 ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3  
 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13  
 訪問修理受付 TEL 043-481-3367  
 お預り修理受付 TEL 043-481-3368

\*掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
 \*掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2111-PDF-BR-000-2111



ミズホORインテグレーションシステム

# Paramon®

MIZUHO OR INTEGRATION SYSTEM



## 手術室の映像を直感的にコントロール


Paramon®は、「術野カメラ」「内視鏡映像」「電子カルテ」「PACS」など、手術室内のさまざまな映像ソースを集約し一括管理。各種ディスプレイへの映像出力、映像の録画操作、遠隔地へのライブ配信を**タッチパネルで直感的に操作する映像管理システム**です。

円滑な情報共有により手術のサポートに貢献するだけでなく、安全管理から教育に至るまで、幅広く映像ソースを活用できます。

手術室の条件やお客様のニーズに最適な3シリーズをラインナップ。

- Paramon® Pro** (パラモン・プロ)  
映像の入出力数が最も多く、4K画質にも対応するハイスペックモデル。
- Paramon® μ** (パラモン・マイクロ)  
扱いやすくバランスのとれたミドルクラスモデル。
- Paramon® Eco** (パラモン・エコ)  
必要な機能のみを厳選したエントリーモデル。

※詳細は裏面のスペック表をご覧ください

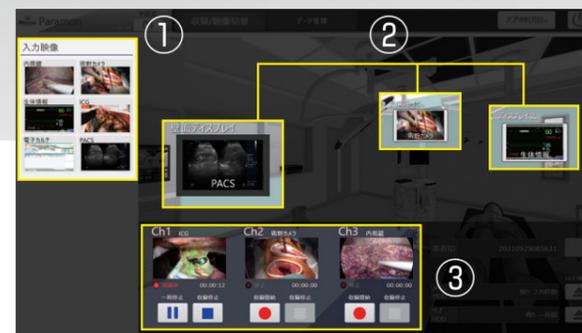

※画面構成は実際の手術室に合わせて作成いたします

### ① 映像ソース表示エリア

手術室内の映像ソースを一括管理。術野カメラ、内視鏡カメラ、電子カルテ、PACS、生体情報などの映像を表示します。

### ●ライブ配信

Paramon®で一括管理されている映像ソースをライブ配信することが可能です。任意の映像ソースを遠隔地でも視聴でき、手術進捗を視覚的に把握、管理運用の効率化が図れます。

### ② 映像出力

Paramon®で一括管理した映像ソースを手術室内のアームディスプレイや壁面モニターに任意に出力。出力したい映像の切替はタッチパネルで行えるので、ドクターのニーズに合わせた映像切替、手術の進捗把握やスタッフ間の情報共有もスムーズです。

### ③レコーディングエリア

Paramon®で一括管理している映像ソースを録画したいときは、レコーディングエリアに入れて収録開始ボタンをタッチするだけ。タッチパネルの直感操作で簡単に録画ができ、保存された映像は医療安全や教育、学会発表にも活用できます。

※映像はUSB接続のHDDやサーバーに保存可能です。