





# Venture<sup>®</sup>



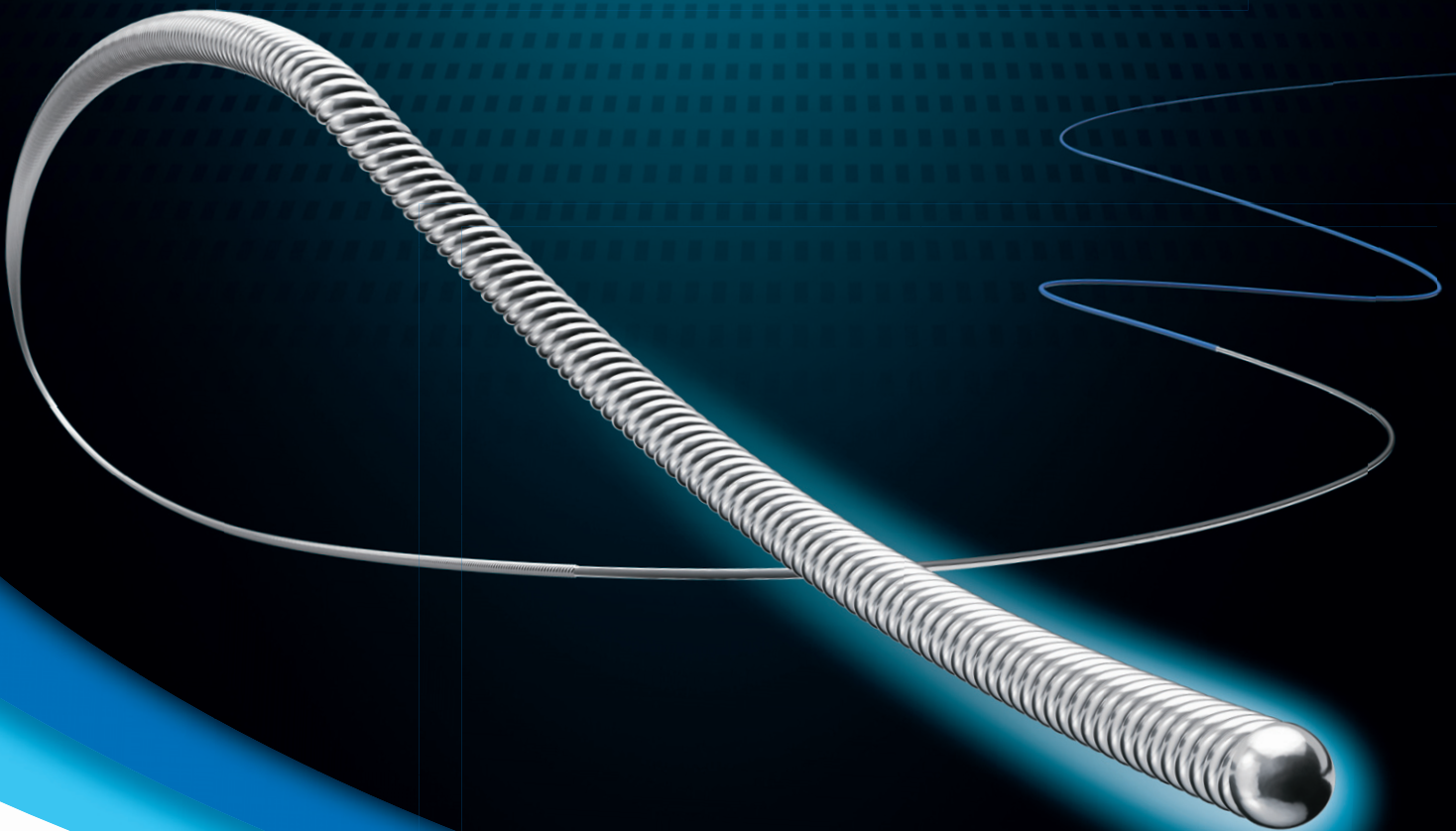

# Venture<sup>®</sup>

## ハイブリッドワイヤーコアとコーティングの絶妙なバランスで 快適かつ安定した操作性を目指しました。

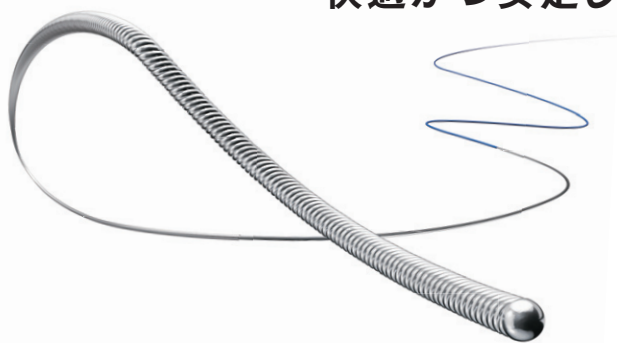

### 特殊なコーティングテクノロジー

病変部までスムーズにアクセスできるように、Venture<sup>®</sup>は表面の潤滑性を追求。遠位側には特殊な親水性コーティング (Hydrophilic SLIP COAT™) を、近位側にはPTFEコーティングを施すことで、進入時における血管内の摩擦抵抗の軽減とともに、カテーテルの追従性も探求しました。

### シェイパブルチップ

Venture<sup>®</sup>の先端部は、ワイヤーコアをテーパー加工し、その外周をコイルスプリングでカバー。これにより、進入時の血管壁への接触を和らげるとともに、先端部の柔軟性を維持しつつ、思い通りのシェイピングを実現。


### X線不透過コイルスプリング

コイルスプリングの先端部 (先端から50mm) にはX線不透過の素材を採用。血管内を進入するガイドワイヤーの微細な動きを、X線透視下において確認できます。

### ハイブリッドワイヤーコア

## NiTi X SS

先端柔軟性と押し引き・トルクのコントロールを高い次元で両立するために、Venture<sup>®</sup>はワイヤーコアに2つの素材を採用。遠位側には柔軟性のある形状記憶合金「ナイチノール (NiTi)」を、近位側には推進力・トルク伝達性の高い「ステンレススチール (SS)」を採用し、「SmartWeld™」という特殊技術で接合。快適な操作性と血管選択性を追求しました。

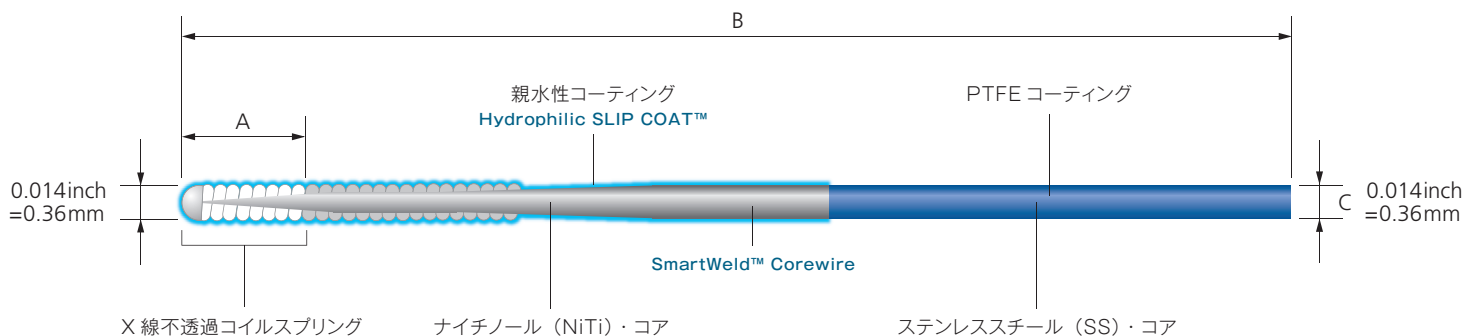

| 商品コード     | JANコード        | 商品名             | A    | B      | C         | 先端     |
|-----------|---------------|-----------------|------|--------|-----------|--------|
| 27-014-01 | 4946329383713 | Venture14 200cm | 50mm | 2000mm | 0.014inch | シェイパブル |
| 27-014-02 | 4946329383720 | Venture14 315cm | 50mm | 3150mm | 0.014inch | シェイパブル |

|          |   |                       |
|----------|---|-----------------------|
| 高度管理医療機器 | 類 別：機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管<br>一般の名称：心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ<br>販 売 名：ミズホマイクロガイドワイヤー<br>JMDNコード：35094114 | 承認番号:30300BZX00130000 |
|----------|---|-----------------------|

## ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

お問い合わせ 特販部 ニューロバスキュラーグループ  
TEL 03-6630-9916 FAX 03-3813-5068

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。  
2501-PDF-BR-002-2501



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

